

- |   |   |
|---|---|
| 1. 电源开关<br>Power on/off                   | 10. 定格键<br>Freeze                                 |
| 2. 切换有线口腔内窥镜<br>Switch to wire camera     | 11. 菜单向上键<br>Menu up                              |
| 3. 切换无线口腔内窥镜<br>Switch to wireless camera | 12. 单画面, 四分割画面切换<br>Switch to single, quad images |
| 4. 切换显示器内置摄像头<br>Switch to monitor camera | 13. 菜单向左键 (音量小声)<br>Menu left (Volume Down)       |
| 5. 切换视频信号输入<br>Switch to video input      | 14. 确认键<br>OK                                     |
| 6. 切换计算机信号输入<br>Switch to PC input        | 15. 菜单向右键 (音量放大声)<br>Menu Right (Volume Up)       |
| 7. 图片回放上一张<br>Last photo                  | 16. 保存图片至 SD 卡控制键<br>Save photo to SD card        |
| 8. 删除图片<br>Delete photo                   | 17. 菜单向下键<br>Menu Down                            |
| 9. 图片回放下一张<br>Next photo                  | 18. 画面设定菜单键<br>Screen Setting Menu                |



东莞麦得科技有限公司  
DONGGUAN MAGENTA TECHNOLOGY CO., LTD



东莞麦得科技有限公司  
DONGGUAN MAGENTA TECHNOLOGY CO., LTD

15寸口腔内窥镜一体机  
15 inch dental monitor with oral camera system

*New*



产品特点：

- 内窥镜与显示器完美结合
- 带SD卡储存, 解决以往内窥镜图片不能储存的问题
- 显示器内置摄像头, 可拍摄患者头像, 方便资料归档
- 可四分格, 方便对比
- 可与电脑连接, 使用电脑来管理资料, 或在显示器上播放多媒体影片

Features:

- Perfect combination of intraoral camera and monitor.
- With SD card memory, solve the problem photos cannot be saved.
- Monitor could take picture for patient head with built-in webcam, in order to save files.
- It could compare with quad function.
- It could manage data after connected with computer, or display multi-media file in monitor.

经销商  
Distributor


## 屏幕按钮说明 Display buttons illustration.



\* 此按键为触摸按键，使用时请用手指轻按2秒。  
\*The buttons are touch button. Please click the buttons 2 seconds with finger.

A: 电源开关 Power on/off	H: 画面回放下一张 Page Down.
B: 内窥镜与内置摄像头切换键 Toggle key for oral camera and webcam.	I: 画面回放上一张 Page Up.
C: 内窥镜与PC(VGA)信号切换键 Toggle key for oral camera and PC(VGA)signal.	J: 音量大声 Volume Up.
D: 有线/无线内窥镜切换键 Toggle key for wire/wireless oral camera.	K: 音量小声 Volume Down.
E: 单画面与四画面切换键 Toggle key for single and quad image.	L: 显示器把手 Monitor Handle.
F: 遥控器红外线接收端与电源指示灯 Remote control IR receiver and power indicator.	M: 内窥镜手柄挂架 Camera Holder.
G: 画面删除键 Delete key.	N: 显示屏内置摄像头 Monitor built-in webcam.

## 屏幕背面说明 Display back illustration.

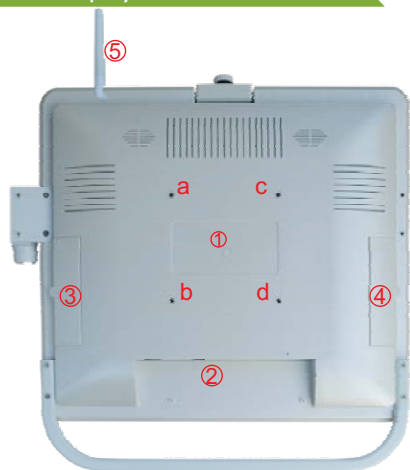


### ① 显示器与支架的连接

#### Monitor and holder connection.

将显示器的abcd四个螺丝孔，用螺丝固定于显示器支架上。  
Fix LCD holder with screws in abcd holes.

### ② 显示器连接端口说明


#### Monitor connecting port illustration.

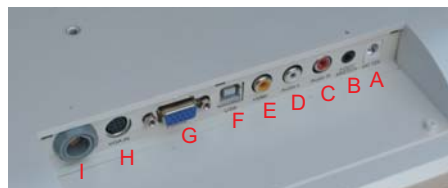

A: DC 12V 3A 电源插口 DC 12V 3A power in	F: USB连接电脑影像声音插口 USB port to connect with PC video and voice
B: 脚踏开关插口 Pedal in	G: VGA 电脑信号输入 VGA port for PC signal input.
C: 视频声音右声道输入 Video voice R-CH input	H: 外接内窥镜插口 External oral camera port.
D: 视频声音左声道输入 Video voice L-CH input	I: 有线内窥镜插口 Wire oral camera port.
E: Video视频输入 Video input	

### ③ SD卡槽与外接USB接口

#### SD card slot and external USB port.

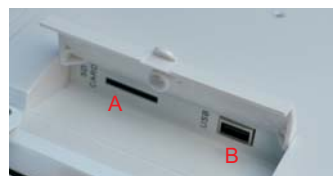

A: SD卡槽  
SD CARD

B: USB 2.0  
(在连接电脑的情况下才有功能)  
It can be used when connected with PC

### ④ 内窥镜无线接收器插口


#### Camera wireless receiver port.



### ⑤ WIFI 发射天线

#### WIFI sender antenna.

## 内窥镜手柄说明 Oral camera

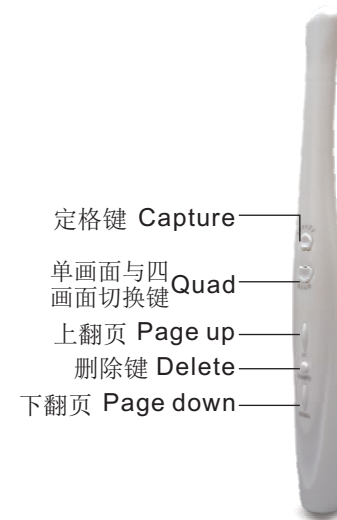

- 1/4" 索尼CCD;
- 130万像素;
- 6颗白帜LED灯;
- 手柄可四分格，上下翻页，删除所拍的图片等。
- 1/4" Sony CCD
- 1.3 mega pixels
- 6 pcs white LED
- Handpiece could quad, page up/down, delete images.

\* 手柄上的定格键，只是将图片暂存在虚拟内存中(虚拟内存可储存8张图片)，如果需要长期保存，请用遥控器的储存键保存到SD卡中并拷贝到电脑存档。

\*Camera capture button is save images into virtual memory(virtual memory could save 8pcs photos only), if you want to preserve permanently, please use remote control save key store into SD card and copy to computer.

## 无线发射器与接收器 Wireless Launcher & Receiver



无线发射器  
Wireless Launcher



无线接收器  
Wireless Receiver